


Splní vaše základní požadavky

Vážení bez starostí



Snadné použití

Devět integrovaných procesů včetně kontrolního vážení, sčítání a recepturování umožní obsluze pustit se okamžitě do práce. Identifikace vzorků pomocí ID kódů a zabezpečení heslem zabráni případné změně nastavení nepovolanou osobou.

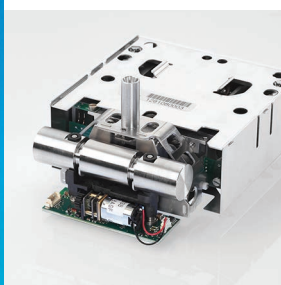

Zaručená přesnost

Snímač hmotnosti založený na principu elektromagnetické kompenzace síly (EMFC) s plně automatickou kalibrační technologií (FACT) poskytuje setrvale přesné výsledky a automaticky provádí justování váhy. Integrovaná ochrana proti přetížení zajišťuje váze dlouhodobou životnost.



Intuitivní dotykové ovládání

Barevný dotykový TFT displej o úhlopříčce 4,5" s přehlednými ikonami a intuitivní nápovědou usnadňuje uživateli rychlé ovládání, a to i v plátěných nebo gumových rukavicích. Textový a grafický návod v několika jazycích vás postupně provede všemi kroky vážení.



Snadná správa dat

Díky několika různým rozhraním přístroj propojíte se čtečkou čárových kódů, tiskárnou nebo počítačem a zajistíte si tak snadnou návaznost a správu dat. USB a RS232C připojení společně s doplňkovým Bluetooth adaptérem usnadňují nahrávání a přenos dat.



Analytické váhy ME-T

Základní funkce, spolehlivý výkon

Každá laboratoř potřebuje váhu, která přináší základní funkce vážení i snadné ovládání a poskytuje každý den přesné, spolehlivé výsledky.

Analytické váhy ME-T od METTLER TOLEDO jsou ideální pro citlivé, ale rutinní vážení ve vaší laboratoři. Intuitivní dotyková obrazovka zjednodušuje každodenní práci, zatímco vestavěné funkce poskytují obsluhu vše, co k vážení potřebuje, s požadovanou přesností, opakovatelností a návazností.

Kovová základna a vysoce kvalitní povrchová úprava dělají z váhy ME-T odolný přístroj do náročných podmínek a hladké plochy zároveň usnadňují čištění. Tato přesná váha je zkonstruována tak, aby fungovala a vydržela!

Analytické váhy ME-T 0,1 mg

	ME54T	ME104T	ME204T
Technické specifikace	ME54TE	ME104TE	ME204TE
Mezní hodnoty			
Maximální váživost	52 g	120 g	220 g
Odečitatelnost	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
Opakovatelnost (při nominálním zatížení)	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
Odchylka linearity (zkušební zatížení)	0,2 mg (10g)	0,2 mg (20g)	0,2 mg (50g)
Typické hodnoty			
Opakovatelnost, typická (sd)	0,08 mg	0,08 mg	0,08 mg
Linearita, typická	0,06 mg	0,06 mg	0,06 mg
Odchylka mimostředové zátěže (zkušební zatížení) ¹⁾	0,1 mg (20g)	0,1 mg (50g)	0,12 mg (100g)
Odchylka citlivosti (zkušební závaží)	0,1 mg (50g)	0,2 mg (100g)	0,24 mg (200g)
Minimální navážka vzorku (dle USP)	160 mg	160 mg	160 mg
Minimální navážka vzorku (U=1 %, k=2)	16 mg	16 mg	16 mg
Doba ustalování	2 s	2 s	2 s
Rozměry			
Vážicí miska (Ø)	90 mm	90 mm	90 mm

1) Dle normy OIML R76



Vlastnosti

Přesné výsledky	Kompenzace elektromagnetické síly (EMFC) FACT interní justování nebo externí kalibrace Kovová základna
Efektivní provoz	Barevný dotykový TFT displej s úhlopříčkou 4,5" Statistická analýza dat Ochrana proti přetížení
Zajištění kvality	Zadání až 4 ID kódů pro 1 vzorek Ochrana heslem 15 dostupných jazyků
Bezproblémové procesy	3 rozhraní - zařízení USB, USB host a RS232 Možnost použití Bluetooth PC Direct pro snadný přenos dat

Příslušenství

Tiskárny P-50 Excellence



Rychlý, vysoce kvalitní tisk na papír, samolepicí štítky i samolepicí papír v roli (včetně čárových kódů).

Adaptéry Bluetooth



Posílejte data mezi vahou a počítačem, tabletem nebo tiskárnou bezdrátově. Nepotřebujete žádný další software.

SmartPrep™



Jednorázové antistatické násypky umožňují bezpečné a rychlé navážení prášků. Jednoduše zvažte, přeneste a opláchněte.

Sada pro stanovení hustoty



Speciální sada pro stanovení hustoty pevných i kapalných látek s vestavěnou aplikací.

U elektroda



Volně stojící U elektroda odstraňuje elektrostatické náboje ze vzorků a nádob.

Další informace o příslušenství naleznete na adrese www.mt.com/lab-accessories

Česko **Mettler-Toledo, s. r. o.**
Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 226 808 150, Fax: +420 226 808 170
Servis: +420 226 808 163, E-mail: sales.mtcz@mt.com

Slovensko **Mettler-Toledo s. r. o.**
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44 44 12 20, 22, Fax: +421 2 44 44 12 23
Servis: +421 2 44 44 12 21, E-mail: predaj@mt.com

Technické změny vyhrazeny, 30292887A
© 02/2020 Mettler-Toledo, s.r.o.
Vytlačeno v České republice

www.mt.com/met-analytical

Další informace